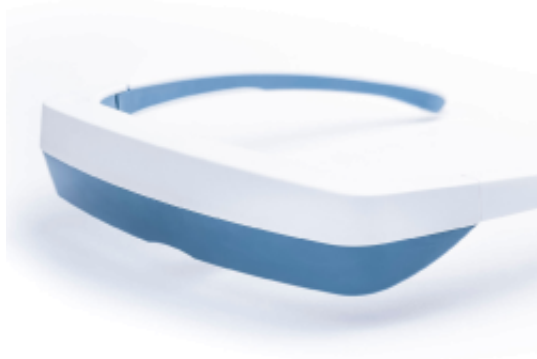


Link do produktu: <https://www.medbox.pl/luminette-3-okulary-do-swiatloterapii-bluetooth-app-p-1815.html>

Luminette 3 okulary do światłoterapii BLUETOOTH APP

Cena	1 190,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	LUCIMED

Opis produktu

Luminette 3 to już trzecia generacja okularów do światłoterapii.

Cechy okularów Luminette 3 (porównanie z modelem Luminette 2):

- lżejsza od poprzednika - waga tylko 51 gram (poprzednio - 68 gram)
- nowoczesne baterie litowo-jonowy (poprzednio AAA NiMH)
- 10 sesji na jednym ładowaniu (poprzednio 5 sesji)
- trzy poziomy intensywności świecenia: 500, 1000, 1500 luxów
- Bluetooth (brak u poprzednika)
- APP- współpraca z aplikacją na telefon (aplikacja do ściągnięcia [APP Store](#) i [Google Play](#) lub na stronie producenta myluminette.com (brak w modelu Luminette 2)
- gwarancja: 24 miesiące

Optymalny i innowacyjny system terapii światłem zapewniający maksymalny komfort użytkowania i mobilność.

Luminette 3 działa dzięki innowacyjnemu urządzeniu optycznemu:

wiązka światła dostaje się do wnętrza Twojego oka w naturalny sposób, jak promienie słońca, nie dając efektu oślepienia ani nie pogarszając widoczności.

Innowacja: białe światło wzmocnione niebieskim, dla najlepszej efektywności.

Lekkie okulary Luminette 3 emitują białe światło wzmocnione światłem niebieskim o zakresie 468 nm. Zostało naukowo udowodnione że ta długość fali światła niebieskiego jest najbardziej skuteczna w stymulowaniu wpływu promieni słonecznych i aktywuje pozytywną reakcję organizmu na jego działanie.

Niezależne badania wykazały, że Luminette 3 daje takie same wyniki jak lampa naświetlająca 10000 luksów.

Nowy model Luminette 3 jest wydajniejszy od poprzednika - ładowanie dzięki zmianie akumulatora odbywa się co 10 sesji, a nie jak do tej pory co 5 sesji.

Pytania i odpowiedzi:

- Jak często używać Luminette?

- Radzimy używać Luminette raz dziennie.

- Jak długo powinna trwać sesja?


- To zależy od Twojego wyboru natężenia światła: od 20 minut (maksymalne natężenie) do 45 minut (minimalne natężenie).

- Po jakim czasie zauważę efekty?

- Efekt "pobudzenia" przy używaniu Luminette 3 jest praktycznie natychmiastowy. Od pierwszych kilku użyciu okularów, poczujesz przyływ pozytywnej energii i dobrego humoru. Jeśli korzystasz z Luminette aby zwalczyć jet-lag, wyniki będą widoczne od razu. Jeśli używasz Luminette, aby skorygować zaburzenia fazy snu, wyniki będą widoczne po 4 do 7 dni.

- Jak prawidłowo ustawić Luminette 3?

- Ustawienie okularów Luminette 3:

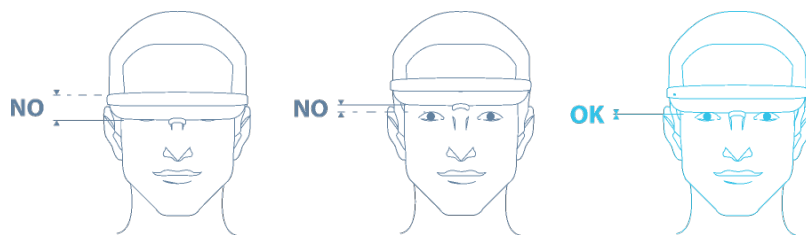

Jak wybrać lampę do terapii światłem?

Jak wybrać lampę do terapii światłem?

Wybierając lampę do terapii światłem, pamiętaj o następujących rzeczach:

- **Regulacja ustawienia** - ściemniania i jasności zapewniają różnorodność i wszechstronność.
- **Kształt**: Wybierz lampę, która pasuje do Twojego otoczenia, odpowiada Twoim potrzebom i gustom,
- **Możliwość przenoszenia, zawieszenia na ścianie lub ustawienia lampy,**
- **Solidność i jakość wykonania**
- **Certyfikat** - potwierdzona badaniami skuteczność lampy w terapii światłem - sprzedawane przez nas lampy antydepresyjne są wyrobami medycznymi i mają potwierdzone certyfikaty i dopuszczenia do obrotu.
- **Intensywność światła** - typowa lampa do terapii światłem ma maksymalną jasność 10 000 luksów,
- **Możliwość regulacji natężenia światła** - możliwość stopniowej regulacji w ciągu dnia lub nocy.